

Lensy Care 8

Reiniger für alle Arten von weichen, sauerstoffdurchlässigen und formstabilen Kontaktlinsen.

Nettoyant pour toutes sortes de lentilles de contact souples et perméables.

Detergente per tutti i tipi di lenti a contatto morbide e gas-permeabili.

Lensy Care 8



Reiniger für alle Arten von weichen, sauerstoffdurchlässigen und formstabilen Kontaktlinsen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Lösung zur Reinigung und Entfernung des Fettfilms auf Kontaktlinsen. Verwenden Sie es täglich gemäß Gebrauchsanweisung.

Gebrauchsanweisung

1. Waschen Sie sich sorgfältig die Hände.
2. Reiben Sie beide Seiten der Linse vorsichtig mit der Reinigungslösung auf der Handfläche.
3. Spülen Sie die Linsen mit Kombilösung, wenn Sie weiche Linsen verwenden, bzw. Aufbewahrungslösung bei sauerstoffdurchlässigen Linsen.
4. Bewahren Sie die Kontaktlinsen über Nacht bzw. mindestens sechs Stunden lang in Kombilösung oder Aufbewahrungslösung im geschlossenen Behälter auf.
5. Vor dem Einsetzen können Sie die Linsen auch noch einmal gut mit Kombilösung oder Aufbewahrungslösung abspülen.

Vorsichtsmassnahmen



- VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT DES PRODUKTES MIT DEN AUGEN. DIES KANN ZU REIZUNGEN FÜHREN.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Tropfvorrichtung mit einer anderen Oberfläche.
- Bewahren Sie die Flasche gut verschlossen auf.
- Kontrollieren Sie vor der ersten Verwendung des Produktes, ob der Verschluss intakt ist. Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen verbrauchen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen der Bestandteile allergisch reagieren.

Zusammensetzung

Borsäure, Natriumtetraborat, Hydroxyethylcellulose, Dinatriumcocoamphodiacetat, Isopropylalkohol 20,0% und Dinatriumedetat 0,1% in gereinigtem Wasser.

Lensy Care 8



Nettoyant pour toutes sortes de lentilles de contact souples et perméables.

Ce produit est une solution de nettoyage et de dégraissage des lentilles de contact. Utilisez-le tous les jours comme indiqué dans les instructions.


Mode d'emploi

1. Lavez bien vos mains.
2. Massez soigneusement les deux faces de la lentille sur la paume de la main avec une quantité suffisante de nettoyant.
3. Rincez avec la solution multifonction, si vous utilisez des lentilles souples, ou bien avec conservateur, si vous utilisez des lentilles perméables.
4. Gardez les lentilles dans leur étui immergées toute la nuit ou pendant au moins six heures dans la solution multifonction ou conservateur.
5. Si vous le désirez, avant de replacer les lentilles sur vos yeux, rincez-les bien avec la solution multifonction ou conservateur.

Lensy Care 8



Précautions

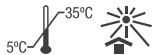

- ÉVITER LE CONTACT DU PRODUIT AVEC LES YEUX. IL PEUT PROVOQUER UNE IRRITATIO.
- Évitez de toucher l'embout du flacon avec quelque surface
- Maintenez le flacon bien fermé.
- Vérifiez que le scellé de l'emballage est intact avant d'utiliser le produit pour la première fois. À utiliser avant 90 jours après l'ouverture.
- Tenez hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants.

Composition

Acide borique, tétraborate de sodium, hydroxyéthylcellulose, cocoamphodiacétate disodique, alcool isopropylique 20,0% et édétate disodique 0,1% dans de l'eau purifiée.

Detergente per tutti i tipi di lenti a contatto morbide e gas-permeabili.

Questo prodotto è una soluzione per pulire e sgrassare le lenti a contatto. Impiegare quotidianamente come indicato dalle istruzioni.

Istruzioni per l'uso

1. Lavarsi bene le mani.
2. Strofinare delicatamente, con un'adeguata quantità di detergente entrambi i lati della lente sul palmo della mano.
3. Sciacquare con soluzione unica se si utilizzano lenti morbide o con soluzione conservante se si utilizzano lenti gas-permeabili.
4. Riporre le lenti nel portalenti, immergendole in soluzione unica o conservante per tutta la notte o almeno sei ore.
5. Se si desidera, prima di indossare di nuovo le lenti, sciacquarle con soluzione unica o conservante.

Precauzioni



- EVITARE IL CONTATTO DEL PRODOTTO CON GLI OCCHI, PUÒ PROVOCARE IRRITAZIONI.
- Evitare di toccare qualsiasi superficie con il beccuccio.
- Conservare il flacone ben chiuso.
- Prima di utilizzare il prodotto, verificare l'integrità del sigillo di garanzia. Una volta aperto, consumare entro 90 giorni.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare in caso di allergia a uno o più componenti del prodotto.

Composizione

Acido borico, tetraborato di sodio, idrossietilcellulosa, cocoanfodiacetato disodico, alcool isopropilico 20,0% ed edetato disodico 0,1% in acqua purificata.



Vertrieb/ Distribution/ Distribuzione

Dynoptic Partner AG
CH-8645 Rapperswil-Jona

Disop
Avda. Valdelaparra, 31-A
28108 Madrid, España

STERILE A

CE 0318

