

Lensy Care 15

DE

Reiniger

für gasdurchlässige formstabile Contactlinsen


Der **Lensy Care 15** Reiniger dient zur täglichen Reinigung von gasdurchlässigen formstabilen Kontaktlinsen.

Die Reinigungswirkung des **Lensy Care 15** Reinigers wird durch kleinste Teilchen in der Lösung garantiert, die Ablagerungen auf der Kontaktlinse entfernen.

Gebrauchsanleitung

- Waschen Sie Ihre Hände.
- Flasche vor jedem Gebrauch gut schütteln.
- Legen Sie die Linse auf die Handfläche und geben Sie einen Tropfen **Lensy Care 15** Reinigungslösung auf die Linse.
- Reiben Sie diese vorsichtig ca. 10 bis 20 Sekunden zwischen den Fingerkuppen.
- Spülen Sie die Linse mit reichlich **Lensy Care 16** Aufbewahrung oder **Lensy Care 9** Kochsalzlösung ab, um den **Lensy Care 15** Reiniger völlig zu entfernen.
- Füllen Sie die **Lensy Care 16** Aufbewahrungslösung in den Aufbewahrungsbehälter und legen Sie die Linsen über Nacht jedoch mindestens für 6 Stunden in den Behälter.

Vorsichtsmassnahmen

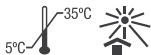

- Das Produkt ist nicht geeignet für weiche Kontaktlinsen.
- Diese Lösung nicht ins Auge bringen, falls doch mit Wasser ausspülen.
- Flasche nach Gebrauch gut verschliessen.
- Tropferspitze nicht mit dem Finger berühren.
- Kontrollieren Sie vor der ersten Verwendung des Produktes, ob der Verschluss intakt ist.
- Innerhalb von 90 Tagen nach Öffnen der Flasche verbrauchen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen der Bestandteile allergisch sind.

Zusammensetzung

Natriumchlorid, Laurylthersulfat, Silikat, Titandioxid, Borsäure, Natriumtetraborat, Dinatriumedetat 0,1% und Polyhexamethylenbiguanid 0,001% in gereinigtem Wasser.

Lensy Care 15

FR

Nettoyant

pour les lentilles de contact rigides perméables au gaz


Lensy Care 15 nettoyant sert au nettoyage quotidien des lentilles de contact rigides perméables au gaz.

L'effet de nettoyage de **Lensy Care 15** nettoyant est garanti par de petites particules présentes dans la solution qui éliminent les dépôts de la lentille de contact.

Mode d'emploi

- Bien se laver les mains.
- Agiter le flacon avant chaque utilisation.
- Déposer la lentille dans la paume de la main, puis ajouter quelques gouttes de **Lensy Care 15** nettoyant sur la lentille.
- La frotter soigneusement pendant 10 à 20 secondes entre le bout des doigts.
- Rincer abondamment la lentille avec **Lensy Care 16** conservateur ou la solution saline **Lensy Care 9** afin d'éliminer complètement **Lensy Care 15** nettoyant.
- Remplir le porte-lentilles **Lensy Care 16** conservateur et y laisser les lentilles toute la nuit ou pendant au moins 6 heures.

Précautions

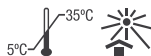

- Le produit ne convient pas pour les lentilles de contact souples.
- Cette solution ne doit pas entrer en contact avec les yeux. Si tel est le cas, les rincer avec de l'eau.
- Bien fermer le flacon après utilisation.
- Ne pas toucher l'embout du flacon avec les doigts.
- Vérifier si le scellé est intact avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- Consommer le produit dans un délai de 90 jours après la date d'ouverture.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants.

Ingrédients

Chlorure de sodium, laureth sulfate, gel de silice, dioxyde de titane, acide borique, tétraborate de sodium, édétate disodique 0,1% et polyhexaméthylène biguanide 0,001% dans de l'eau purifiée.

Lensy Care 15

IT

Detergente

per lenti a contatto rigide gas-permeabili


Il Detergente **Lensy Care 15** è un prodotto per la pulizia quotidiana delle lenti a contatto rigide gas-permeabili.

L'azione detergente del **Lensy Care 15** è garantita dalla presenza di solidi in sospensione che eliminano tutti i depositi che si accumulano sulla lente a contatto durante l'uso.

Istruzioni per l'uso

- Lavarsi bene le mani.
- Agitare bene il flacone prima dell'uso.
- Porre la lente sul palmo della mano e versare sulla stessa una goccia di Soluzione Detergente **Lensy Care 15**.
- Strofinare la lente delicatamente con i polpastrelli per 10-20 secondi.
- Risciacquare la lente abbondantemente con la Soluzione Conservante **Lensy Care 16** oppure con la Soluzione **Lensy Care 9** per eliminare completamente il detergente.
- Riporre le lenti nel portalenti lasciandole immerse nella Soluzione Conservante **Lensy Care 16** fino al giorno successivo o per almeno 6 ore.

Precauzioni

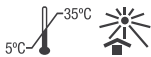

- Non utilizzare questo prodotto con lenti a contatto morbide.
- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. In caso di contatto risciacquare abbondantemente con acqua.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Non toccare alcuna superficie con la punta dell'erogatore.
- Prima di utilizzare il prodotto, verificare l'integrità del sigillo di garanzia.
- Una volta aperto il flacone consumare entro 90 giorni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare in caso di allergia a uno o più componenti del prodotto.

Composizione

Cloruro di sodio, laurilettere solfato, gel di silice, biossido di titanio, acido bórico, tetraborato di sodio, edetato disodico 0,1%, poliesametilene biguanide 0,001% in acqua purificata.



Vertrieb/ Distribution/ Distribuzione

Dynoptic Partner AG
CH-8645 Rapperswil-Jona



Disop
Avda. Valdelaparra, 31-A
28108 Madrid ESPAÑA

CE
0318



STERILE A