

# Lensy Care 16



## Aufbewahrungslösung


zum Desinfizieren und Aufbewahren von sauerstoffdurchlässigen formstabilen Kontaktlinsen

Durch die gute Benetzung der **Lensy Care 16** verlängert sich der Tragecomfort der Linsen.

## Gebrauchsanleitung

- Waschen Sie Ihre Hände.
- Nach dem Reinigen mit **Lensy Care 15**, füllen sie den Aufbewahrungsbehälter mit **Lensy Care 16** und legen sie die Linsen über Nacht, jedoch mindestens 6 Stunden in den Behälter. Die Kontaktlinsen müssen vollständig mit Lösung bedeckt sein.
- Nehmen Sie die Linsen aus dem Behälter und spülen Sie diese vor dem Aufsetzen kurz mit **Lensy Care 16** Aufbewahrungslösung ab.
- Sollten Sie die Linsen im Laufe des Tages einmal abnehmen, befeuchten Sie diese vor dem Aufsetzen mit ein paar Tropfen **Lensy Care 16** Aufbewahrungslösung.

## Vorsichtsmaßnahmen

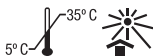

- Verwenden Sie zur Desinfektion der Kontaktlinsen immer eine frische Lösung und entsorgen Sie die zuvor benutzte.
- Flasche nach Gebrauch gut verschließen.
- Tropferspitze nicht mit dem Finger berühren.
- Kontrollieren Sie vor der ersten Verwendung des Produktes, ob der Verschluss intakt ist.
- Innerhalb von 90 Tagen nach Öffnen der Flasche verbrauchen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen der Bestandteile allergisch sind.
- Bei Irritationen der Augen Linsen herausnehmen, das Produkt nicht weiterbenutzen und sofort einen Arzt oder den Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen.
- Die Linsen dürfen höchstens 30 Tage im geschlossenen Linsenbehälter aufbewahrt werden.

## Zusammensetzung

Natriumchlorid, Borsäure, Natriumtetraborat, Hydroxypropylmethylcellulose, Poloxamer, Dinatriumedetat 0,1% und Polyhexamethylenbiguanid 0,0004% in gereinigtem Wasser.

# Lensy Care 16



## Solution conservatrice


pour la désinfection et la conservation des lentilles de contact rigides perméables au gaz

La bonne humidification assurée par **Lensy Care 16** conservateur permet de prolonger le confort lors du port des lentilles.

## Mode d'emploi

- Bien se laver les mains.
- Après le nettoyage avec **Lensy Care 15** nettoyant, remplir le porte-lentilles de **Lensy Care 16** conservateur et y laisser les lentilles toute la nuit ou pendant au moins 6 heures. Les lentilles de contact doivent être entièrement recouvertes de solution.
- Retirer les lentilles du porte-lentilles et les rincer avec **Lensy Care 16** conservateur avant de les remettre.
- S'il est nécessaire d'enlever les lentilles pendant la journée, les humidifier avant de les remettre avec des gouttes de **Lensy Care 16** conservateur.

## Précautions

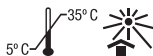

- Toujours utiliser une solution fraîche pour la désinfection des lentilles de contact et jeter celle qui a déjà été utilisée.
- Bien fermer le flacon après utilisation.
- Ne pas toucher l'embout du flacon avec les doigts.
- Avant une première utilisation du produit, vérifier que le scellé est intact.
- Consommer le produit dans un délai de 90 jours à compter de son ouverture.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants.
- En cas d'irritation des yeux, retirer les lentilles, ne plus utiliser le produit et consulter immédiatement un médecin ou un spécialiste en lentilles de contact.
- Les lentilles peuvent être conservées pendant 30 jours maximum dans le porte-lentilles fermé.

## Composition

Chlorure de sodium, acide borique, tétraborate de sodium, hydroxypropylmethylcellulose, poloxamer, édétate disodique 0,1% et polyhexaméthylène biguanidine 0,0004% dans de l'eau purifiée.

# Lensy Care 16

IT

## Soluzione Conservante


per la disinfezione e la conservazione di lenti a contatto rigide gas-permeabili

Grazie alle sue capacità umettanti, la Soluzione Conservante **Lensy Care 16** aumenta il comfort delle lenti a contatto.

## Istruzioni per l'uso

- Lavarsi bene le mani.
- Dopo aver pulito le lenti con la Soluzione Detergente **Lensy Care 15** riporle nel portalenti lasciandole immerse nella Soluzione Conservante **Lensy Care 16** fino al giorno successivo o per almeno 6 ore. Le lenti a contatto devono essere totalmente immerse nella soluzione.
- Per riutilizzare le lenti a contatto, estrarle dal portalenti e risciacquarle con la Soluzione Conservante **Lensy Care 16** prima di indossarle.
- Se fosse necessario rimuovere le lenti durante l'uso, applicare alcune gocce della Soluzione Conservante **Lensy Care 16** su ogni lente prima di indossarle nuovamente.

## Precauzioni

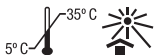

- Per disinfettare le lenti a contatto, utilizzare sempre una soluzione fresca ed eliminare dal portalenti la soluzione residua della disinfezione precedente.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Non toccare alcuna superficie con la punta dell'erogatore.
- Prima di utilizzare il prodotto, verificare l'integrità del sigillo di garanzia.
- Una volta aperto il flacone consumare entro 90 giorni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare in caso di allergia a uno o più componenti del prodotto.
- In caso di irritazioni agli occhi consultare immediatamente un oculista oppure il contattologo.
- Le lenti a contatto possono essere conservate nel portalenti chiuso per un massimo di 30 giorni.

## Composizione

Cloruro di sodio, acido bórico, tetraborato di sodio, idrossipropilmetilcellulosa polossamero, edetato disodico 0,1%, poliesametilene biguanide 0,0004% in acqua purificata.



## Vertrieb/ Distribution/ Distribuzione

Dynoptic Partner AG  
CH-8645 Rapperswil-Jona



Disop  
Avda. Valdeparra, 31-A  
28108 Madrid. España

**STERILE A**

CE 0318



27205 Texto revisado el 22.1.2013