

Enzymtabletten zur Reinigung für alle weichen und sauerstoffdurchlässigen Kontaktlinsen.

Dieses Produkt enthält einen Wirkstoff, mit dem Proteinablagerungen und andere durch den täglichen Gebrauch entstehende Ablagerungen auf der Linse entfernt werden können. Die Enzymtabletten wirken gegen Protein-, Fett-, Muzin- und Kalziumablagerungen.

Wir empfehlen die Verwendung von Enzymtabletten einmal wöchentlich.

GEBRAUCHSANWEISUNG BEI WEICHEN KONTAKTLINSEN

Allgemeine Gebrauchsanweisung (Kombilösungen)

1. Waschen Sie sich die Hände und spülen Sie sie ab.
2. Füllen Sie den Linsenbehälter mit Kombilösung.
3. Geben Sie eine Enzymtablette hinzu.
4. Legen Sie die Kontaktlinsen in die jeweilige Kammer des Behälters.
5. Lassen Sie die Kontaktlinsen über Nacht in der Lösung.
6. Spülen Sie die Kontaktlinsen, bevor Sie sie am nächsten Tag wieder einsetzen, gut mit Kombilösung ab.

Gebrauchsanweisung bei Einstufen-Peroxidsystemen

Waschen Sie sich die Hände und spülen Sie sie ab. Füllen Sie den Linsenbehälter mit der Desinfektionslösung des Peroxidsystems, geben Sie gleichzeitig mit der Tablette zur Neutralisierung eine Enzymtablette hinzu und befolgen Sie die vorgeschriebenen Anweisungen.

Am nächsten Tag sollten Sie die Kontaktlinsen vor dem Einsetzen unbedingt gut mit Kochsalzlösung abspülen.

GEBRAUCHSANWEISUNG BEI SAUERSTOFFDURCHLÄSSIGEN KONTAKTLINSEN

Befolgen Sie die allgemeinen Gebrauchsanweisungen und verwenden Sie dabei entweder eine Kombilösung oder eine Aufbewahrungslösung für sauerstoffdurchlässige Linsen.

Am nächsten Tag sollten Sie die Kontaktlinsen vor dem Einsetzen unbedingt gut mit dieser Lösung abspülen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:



- Bei bis zu 35 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Denken Sie daran, die Linsen nach der Verwendung von Enzymtabletten gut abzuspülen.
- Die Tabletten nicht verschlucken.
- Verwenden Sie das Produkt bei anhaltenden Reizungen nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Optiker.
- Von Patienten mit einer Allergie gegen einen der Bestandteile darf das Produkt nicht verwendet werden.

Comprimés enzymatiques pour le nettoyage de toutes sortes de lentilles de contact souples et perméables aux gaz.

Ce produit contient un principe actif capable d'éliminer les dépôts de protéines et autres dépôts qui s'accumulent tous les jours sur les lentilles. Les comprimés enzymatiques agissent sur les dépôts de protéines, de graisses, de mucine et de calcium.

Nous vous recommandons d'employer les comprimés enzymatiques chaque semaine.

MODE D'EMPLOI AVEC DES LENTILLES SOUPLES :

Mode d'emploi général (solutions multifonctions)

1. Lavez-vous les mains, puis séchez-les.
2. Remplissez l'étui porte-lentilles de solution multifonction.
3. Ajoutez un comprimé enzymatique.
4. Introduisez les lentilles dans le porte-lentilles correspondant.
5. Laissez tremper les lentilles dans la solution toute la nuit.
6. Avant de remettre vos lentilles, rincez-les bien avec la solution multifonction.

Mode d'emploi avec le système peroxyde en une étape

Lavez-vous les mains, puis séchez-les. Remplissez l'étui porte-lentilles avec la solution désinfectante du système peroxyde. Ajoutez un comprimé enzymatique ainsi qu'un comprimé neutralisant et suivez les instructions indiquées.


Avant de remettre vos lentilles, rincez-les bien avec la solution saline.

MODE D'EMPLOI AVEC DES LENTILLES PERMÉABLES

Suivez les instructions du mode d'emploi général en utilisant une solution multifonction ou de conservation pour lentilles perméables.

Avant de remettre vos lentilles, rincez-les bien avec la même solution.

PRÉCAUTIONS

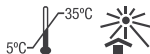

- Conservez les comprimés à une température inférieure à 35 °C et hors de portée des enfants.
- Après l'utilisation des comprimés enzymatiques, n'oubliez pas de bien rincer les lentilles.
- Ne les avalez pas.
- En cas d'irritation persistante, cessez l'utilisation du produit et consultez un contactologue.
- Les personnes allergiques à l'un des composants du produit ne doivent pas l'utiliser.

Lensy Care 20



Zusammensetzung

Natriumchlorid, Dinatriumphosphat und 1,5 mg Subtilisin

Compresse enzimatiche per la pulizia di tutti i tipi di lenti a contatto morbide e gas-permeabili.

Questo prodotto contiene un principio attivo in grado di eliminare i depositi di proteine e di altro genere accumulati sulle lenti durante l'uso quotidiano. Le compresse enzimatiche sono efficaci nei confronti di depositi di proteine, grassi, mucina e altro.

Raccomandiamo di utilizzare le compresse enzimatiche ogni settimana.

ISTRUZIONI PER L'USO CON LENTI MORBIDE

Istruzioni per l'uso generale (soluzioni uniche)

1. Lavarsi bene le mani.
2. Riempire il portalenti di soluzione unica.
3. Aggiungere una compressa enzimatica.
4. Inserire le lenti nei rispettivi cestelli.
5. Lasciare le lenti nella soluzione per tutta la notte.
6. Il giorno successivo, prima di applicare le lenti è necessario pulirle accuratamente con la soluzione unica.

Istruzioni per l'uso con sistema al perossido monofase

Lavarsi bene le mani. Riempire il contenitore portalenti con la soluzione disinfettante del sistema al perossido, aggiungere contemporaneamente una compressa enzimatica e una compressa neutralizzante e procedere secondo le istruzioni seguenti.


Il giorno successivo, prima di applicare le lenti è molto importante pulirle accuratamente con soluzione.

ISTRUZIONI PER L'USO CON LENTI PERMEABILI

Rispettare le istruzioni sulla modalità d'uso generale, utilizzando una soluzione unica o di conservazione per lenti permeabili.

Il giorno successivo, prima di applicare le lenti è necessario pulirle accuratamente con la medesima soluzione.

PRECAUZIONI

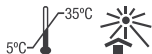

- Conservare a temperatura inferiore a 35 °C e tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Dopo aver utilizzato le compresse enzimatiche, ricordare di sciacquare accuratamente le lenti.
- Non ingerire le compresse.
- In caso di irritazione persistente, interrompere l'uso del prodotto e consultare il contattologo.
- I pazienti allergici a uno o più componenti del prodotto dovranno astenersi dall'utilizzarlo.

Composition

Chlorure de sodium, phosphate disodique, subtilisine 1,5 mg

Composizione

Cloruro di sodio, fosfato disodico, subtilisina 1,5 mg



Vertrieb/ Distribution/ Distribuzione

Dynoptic Partner AG
CH-8645 Rapperswil-Jona

Disop
Avda. Valdelaparra, 31-A
28108 Madrid ESPAÑA

CE
0546

STERILE | A